



# Porter et entretenir correctement l'appareil auditif

Un petit guide pour les personnes qui portent des appareils auditifs, leurs proches, le personnel de soin et tous ceux qui, au quotidien, ont affaire avec des appareils auditifs.  
Avec des astuces et des illustrations compréhensibles.

Ces informations sont disponibles en français, allemand, anglais, espagnol, turc, arabe, russe et chinois.

À télécharger et imprimer sur  
[www.richtig-gut-hoeren.de](http://www.richtig-gut-hoeren.de)

## INSÉRER L'APPAREIL

Éteignez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt. Si votre appareil ne possède pas un tel interrupteur, référez-vous à la notice d'utilisation ou demandez conseil à votre audioprothésiste. Réglez au volume minimum pour éviter un effet Larsen.



## AVANT D'INSÉRER L'APPAREIL

Un autocollant se trouve sur le côté + de toutes les nouvelles piles. Retirez l'autocollant, mettez de côté la pile. Ouvrez le compartiment à pile. Enlevez l'ancienne pile. Séchez le compartiment à pile s'il est humide. Mettez la nouvelle pile avec le + vers le haut.

## RANGER

Éteignez l'appareil auditif.

L'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps :  
→ Enlevez la pile.

Éliminez les piles de manière appropriée.

**biha**

Bundesinnung der  
Hörakustiker KdÖR


# INSTALLER & RETIRER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF

## INSTALLER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF

### APPAREIL CONTOUR D'OREILLE (BTE)

Avec embout classique

Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif.

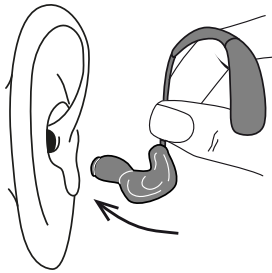


Glissez le boîtier derrière l'oreille de sorte que le tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.



*Il est plus facile d'installer l'appareil lorsque vous tirez avec l'autre main votre oreille vers le haut et le bas.*

Installés correctement, ni l'embout ni l'appareil auditif n'appuient et le tuyau est bien placé.

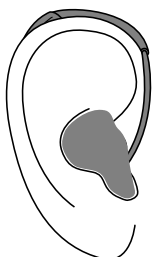


## INSTALLER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF

### APPAREIL CONTOUR D'OREILLE (BTE)

Avec embout open fit


Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif.

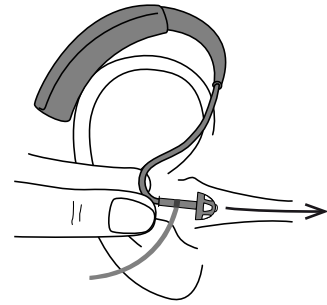

Glissez le boîtier derrière l'oreille de sorte que le tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

*Il est plus facile d'installer l'appareil lorsque vous tirez avec l'autre main votre oreille vers le haut et le bas.*

Placez le support en plastique en forme de fil dans la partie inférieure de l'oreille pour que l'embout tienne fermement dans l'oreille.

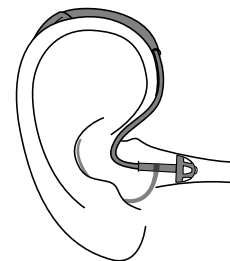

## RETIRER CORRECTEMENT

### BTE

Enlevez d'abord le boîtier de l'oreille. Puis tirez sur l'embout.

Cette description peut différer légèrement en fonction du modèle.


# INSTALLER & RETIRER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF

## INSTALLER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF

### Appareil intra-auriculaire (ITE)

Avec embout classique ou open fit


Placez avec précaution l'appareil auditif avec le côté plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement pour le mettre dans la bonne position. Poussez doucement dans le conduit auditif avec l'index.

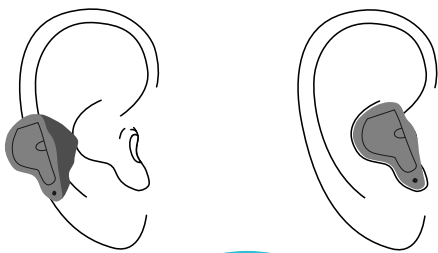

*Il est plus facile d'installer l'appareil lorsque vous tirez avec l'autre main votre oreille vers le haut et le bas.*

### ITC (In-The-Channel) et CIC (Complete-In-The-Channel)

Placez avec précaution l'appareil auditif avec le côté plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement pour le mettre dans la bonne position. Poussez doucement dans le conduit auditif avec l'index. Le CIC est plus petit que le ITC et se place plus profondément dans le conduit auditif.

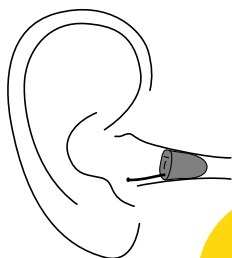

*Il ne doit pas y avoir de sifflement.*

## RETIRER CORRECTEMENT

### ITE

Tenez l'appareil par le bord (ITE) ou le fil de traction (ITC ET CIC) et tirez.  
Ne tirez pas sur le compartiment à pile.

## INSTALLER CORRECTEMENT L'APPAREIL AUDITIF


### À ÉCOUTEUR DANS LE CONDUIT (RIC)

Avec embout classique ou open fit

Les appareils RIC sont aussi appelés appareils à écouteurs déportés. Avec ces derniers, l'écouteur est placé directement dans l'oreille. Un tuyau très fin le relie à l'appareil auditif.


#### RIC avec embout classique

Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Placez avec précaution l'embout avec le côté plus fin en direction de l'oreille. Tournez légèrement pour le mettre dans la bonne position. Poussez doucement dans le conduit auditif avec l'index. Glissez le boîtier derrière l'oreille de sorte que le tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

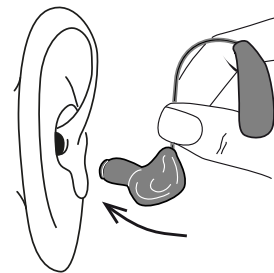

#### RIC avec embout open fit

Tenez l'appareil au bout du tuyau près de l'embout. Insérez l'embout dans le conduit auditif. Glissez le boîtier derrière l'oreille de sorte que le tuyau passe devant l'oreille, serré contre le crâne.

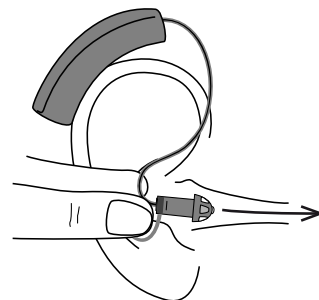

*Il est plus facile d'installer l'appareil lorsque vous tirez avec l'autre main votre oreille vers le haut et le bas.*

Placez le support en plastique en forme de fil dans la partie inférieure de l'oreille pour que l'embout tienne fermement dans l'oreille.

Cette description peut différer légèrement en fonction du modèle.

## ATTENTION



### PROTÉGER DE LA POUSSIÈRE

Ne manipulez l'appareil auditif qu'avec un chiffon sec propre.



### ATTENTION AVEC LES SPRAYS OU CREMES

Appliquez d'abord les produits de beauté, de la crème au parfum, avant d'installer l'appareil auditif.



### DOMMAGES DUS À L'EAU ET LA CHALEUR

- Retirez l'appareil avant le bain, la douche ou avant de vous laver.
- Protégez-le des rayons forts du soleil.
- Ne le stockez pas à proximité d'objets chauffants ou dans la salle de bain.



### SÉCHER PROTÈGE

La chaleur, le froid, l'humidité, même la transpiration peuvent endommager les composés électroniques. Séchez régulièrement, au moins une fois par semaine, l'appareil auditif dans une boîte de séchage spécial. Ne le séchez pas au sèche-cheveux.

*Vous pouvez trouver le chiffon de nettoyage spécial, le solvant et la brosse chez votre audioprothésiste. Ainsi que les produits de soin spéciaux et la boîte de séchage.*

*Ne nettoyez l'appareil auditif qu'avec des produits spéciaux. Ne le nettoyez pas avec de l'eau, de l'alcool ou un produit de nettoyage.*

## REMÉDIER AUX DYSFONCTIONNEMENTS

### PAS DE SON

La pile est vide, a glissé, est tombée :  
→ installez à nouveau la pile.

Le compartiment à pile n'est pas correctement fermé :  
→ refermez-le bien.

### LE VOLUME EST RÉDUIT

Pile faible :  
→ changez la pile.

L'embout, le microphone ou le coude est bouché avec du cérumen :  
→ lavez avec une brosse en fonction de l'appareil auditif.

Dans tous les cas :  
→ L'audioprothésiste vous aide également pour changer des pièces.

### L'APPAREIL AUDITIF SIFFLE

L'appareil n'est pas bien installé :  
→ installez-le à nouveau.

L'appareil auditif est dans la mauvaise oreille :  
→ vérifiez le marquage pour gauche et droite.

L'embout ou le tuyau est défectueux :  
→ faites appel à l'audioprothésiste.

Le conduit auditif est bouché avec du cérumen :  
→ faites appel à votre audioprothésiste ou votre médecin ORL.

### L'APPAREIL GLISSE EN DEHORS DE L'OREILLE

Le conduit auditif est bouché avec du cérumen :  
→ faites appel à votre audioprothésiste ou votre médecin ORL.

L'appareil auditif ne tient pas bien dans l'oreille ou provoque des douleurs :  
→ faites appel à l'audioprothésiste.

### PROBLEMES LORS DE L'INSTALLATION

Un gel spécial peut être appliqué à l'entrée du conduit auditif. L'audioprothésiste sait quoi faire.

Mentions légales

Bundesinnung der Hörakustiker  
(Corporation fédérale des audioprothésistes) KdöR,  
Wallstrasse 5, 55122 Mayence,  
Internet : [www.biha.de](http://www.biha.de), Téléphone +49(0)6131/96 560-0